

SC arstens anitätshaus



Produktübersicht:

**Alles für den Fuß –
Einlagen und
Orthesen genau
nach Maß**

01

Weichschaum Bettungseinlagen

langsohlig für Diabetiker

Kassenüblich

Positions-Nr.:
08.03.02.1XXX

Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Geeignet für Diabetiker, wo es auf eine weiche Bettung des Fußes ankommt. Eine Korrektur ist hier nicht indiziert, sondern nur eine Bettung, um Druckstellen zu vermeiden.
- Das Schuhwerk muss entsprechend Platz haben. Die Einlagen dürfen nicht zu dünn sein, sonst fehlt die Polsterwirkung.



Schaleneinlagen

aus thermoplastischem Kunststoff

Kassenüblich

Positions-Nr.:
08.03.03.1

Maßanfertigung.

Zusätze:

langsohlig, Vorfußpolster, Supination oder Pronation, Fersenpolster.

Anwendungsbereiche

- Vorwiegend bei verstärkt notwendigen Korrekturen und Fehlstellungen.



Kork-Leder-Einlage

langsohlig

Kassenüblich

Positions-Nr.:
08.03.02.0

Maßanfertigung.

Zusätze:

Supination, Pronation, Fersenpolster, Sporn-Aussparung.

Anwendungsbereiche

- Geeignet als semielastische Einlage bei Schuhwerk, das für Einlagen geeignet ist.
- Die Einlage ist vom Aufbau etwas dicker, bedingt durch den Kork hat sie dämpfende Eigenschaften.



Kork-Leder-Einlage

Retrokapitale Abstützung

Kassenüblich

Positions-Nr.:
08.03.02.0

Maßanfertigung.

Zusätze:

Supination, Pronation, Fersenpolster, Sporn-Aussparung, langsohlig.

Anwendungsbereiche

- Die retrokapitale Kork-Leder-Einlage hat eine höhere Spreizfußkorrektur.
- Geeignet bei starkem Spreizfuß und beginnender Entzündung der Mittelfußköpfchen.



Kunststoff-Leder-Einlagen

aus thermoplastischen Kunststoffen

Kassenüblich

Positions-Nr.:
08.03.01.1

Maßanfertigung.

Zusätze:

Supination, Pronation,
Fersenpolster, Sporn-Aussparung,
langsohlig, retrokapital,
Vorfußpolster.

Anwendungsbereiche

- Bei Veränderungen im Sinne eines Knick-, Senk-, Spreiz- oder Hohlfußes.
- Bei Metatarsalgie und Fersensporn.



Multi-Kontur-Einlagen

Kassenüblich

Positions-Nr.:
08.03.02.1

Maßanfertigung.

Diese Einlagen sind mit einer höheren Aufzählung versehen.

Anwendungsbereiche

- Wie Weichschaumeinlagen für besondere Zonentlastung.
- Geeignet für den Sport und bei speziellen Druckentlastungen.



Weichschaumeinlage

langsohlig für druckempfindliche Füße –
geeignet für den Sport

Kassenüblich

Positions-Nr.:
08.03.02.1

Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Die Einlagen eignen sich für aktive Läufer und Sportler mit entsprechendem Schuhwerk. Sämtliche Korrekturen sind möglich.
- Das Schuhwerk sollte Platz für Einlagen haben, da die Einlagen durch die Polsterwirkung eine gewisse Stärke brauchen.



Korrigierende Schaleneinlagen

Kassenüblich


Positions-Nr.:
08.03.03.1

Maßanfertigung

nach Gipsabdruck (Modellform).

Anwendungsbereiche

- Bei schweren Fehlstellungen wie Sichelfuß Klumpfuß, neurogener Knickfuß.

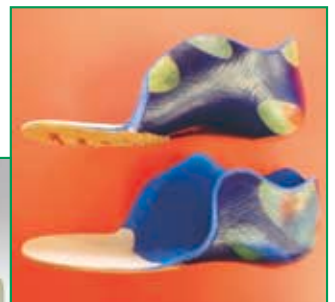

Fertigung lang oder kurz,
individuell der Erkrankung
entsprechend.

Innenschuhorthesen

Kassenüblich

Positions-Nr.:
23.00.00.0422

Maßanfertigung
nach Gipsabdruck
(Modellform).

Anwendungsbereiche

- Fehlstellungen und Fehlhaltungen durch z. B. neurogene Erkrankungen.



Peroneusorthese Walk On

Kassenüblich

Positions-Nr.:
23.00.05.0000

Maßanfertigung
aus Carbon (sehr leichte
Schiene).

Anwendungsbereiche

- Peroneuslähmungen.



Peroneusorthese aus Kunststoff

Kassenüblich

Positions-Nr.:
23.00.05.0000

Maßanfertigung.

Anwendungsbereiche

- Bei Peroneuslähmungen, die sich zurückbilden können – wie bei Patienten mit geringer Aktivität.



SC Carstens
Sanitätshaus GmbH



Wir realisieren **maßgefertigte Hilfsmittel** nach individuellen, im Team – Arzt, Therapeut und Techniker – festgelegten Anforderungen. Hierbei ist Know-how und ein hoher Grad an Individualisierung im Vordergrund. Jeder unserer Kunden erhält eine auf ihn zugeschnittene Lösung.

